

AGRAFEUSE TA™ À TECHNOLOGIE DST SERIES™

Agrafeuse vendue chargée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Références	Description du produit	Chargeurs disponibles	Longueur du tissu avant la fermeture	Longueur du tissu après la fermeture	Code couleur	Nombre d'applications	Nombre d'agrafes	Taille de la section rectangulaire de l'agrafe	Rangées d'agrafes
TA30V3S	TATM DST Series™ 30 mm	TA30V3L	2.5 mm	1.0 mm	○ Blanc	8	23	18 x 27 mm	3
TA3035S	TATM DST Series™ 30 mm	TA3035L	3.8 mm	1.5 mm	● Bleu	8	11	19 x 30 mm	2
TA3048S	TATM DST Series™ 30 mm	TA3048L	4.8 mm	2.0 mm	● Vert	8	11	24 x 35 mm	2
TA4535S	TATM DST Series™ 45 mm	TA4535L	3.5 mm	1.5 mm	● Bleu	8	15	19 x 30 mm	2
TA4548S	TATM DST Series™ 45 mm	TA4548L	4.8 mm	2.0 mm	● Vert	8	15	24 x 35 mm	2
TA6035S	TATM DST Series™ 60 mm	TA6035L	3.5 mm	1.5 mm	● Bleu	8	21	19 x 30 mm	2
TA6048S	TATM DST Series™ 60 mm	TA6048L	4.8 mm	2.0 mm	● Vert	8	21	24 x 35 mm	2
TA9035S	TATM DST Series™ 90 mm	TA9035L	3.5 mm	1.5 mm	● Bleu	8	33	19 x 30 mm	2
TA9048S	TATM DST Series™ 90 mm	TA9048L	4.8 mm	2.0 mm	● Vert	8	33	24 x 35 mm	2


A DESTINATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

CARL1377
 © Medtronic, France. Décembre 2017.
 Tous droits réservés. Crédit photos Medtronic.
 Imprimé par RR Donnelley. www.rrdonnelley.com
 Réalisation hors system.

www.medtronic.fr
 Medtronic France S.A.S
 27 Quai Alphonse Le Gallo | CS30001
 92513 Boulogne-Billancourt Cedex
 Tél. +33(0)1 55 38 17 00 | Fax : +33(0)1 55 38 18 00
 RCS Nanterre 722 008 232

Medtronic
 Further, Together*

TECHNOLOGIE DST SERIES™

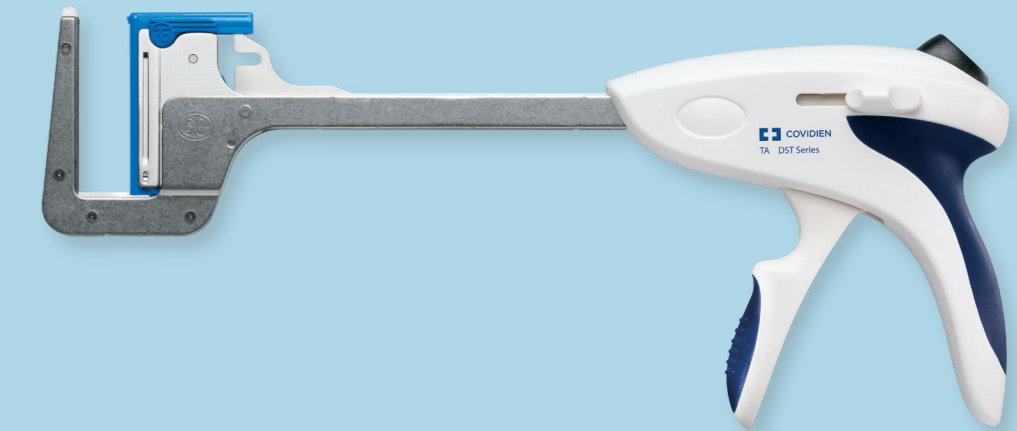

Agrafeuse TA™ DST Series™

Medtronic
 Further, Together*


AGRAFEUSE TA™ À TECHNOLOGIE DST SERIES™

CARACTÉRISTIQUES

Agrafeuse disponible en :

- 4 longueurs de chargeurs : 30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm
- 3 hauteurs d'agrafes : 2,5 mm, 3,8 mm et 4,8 mm

- Un guide de section
- 2 rangées d'agrafes, 3 rangées pour le vasculaire
- L'agrafeuse TA™ peut être rechargée sept fois pour un total de huit activations

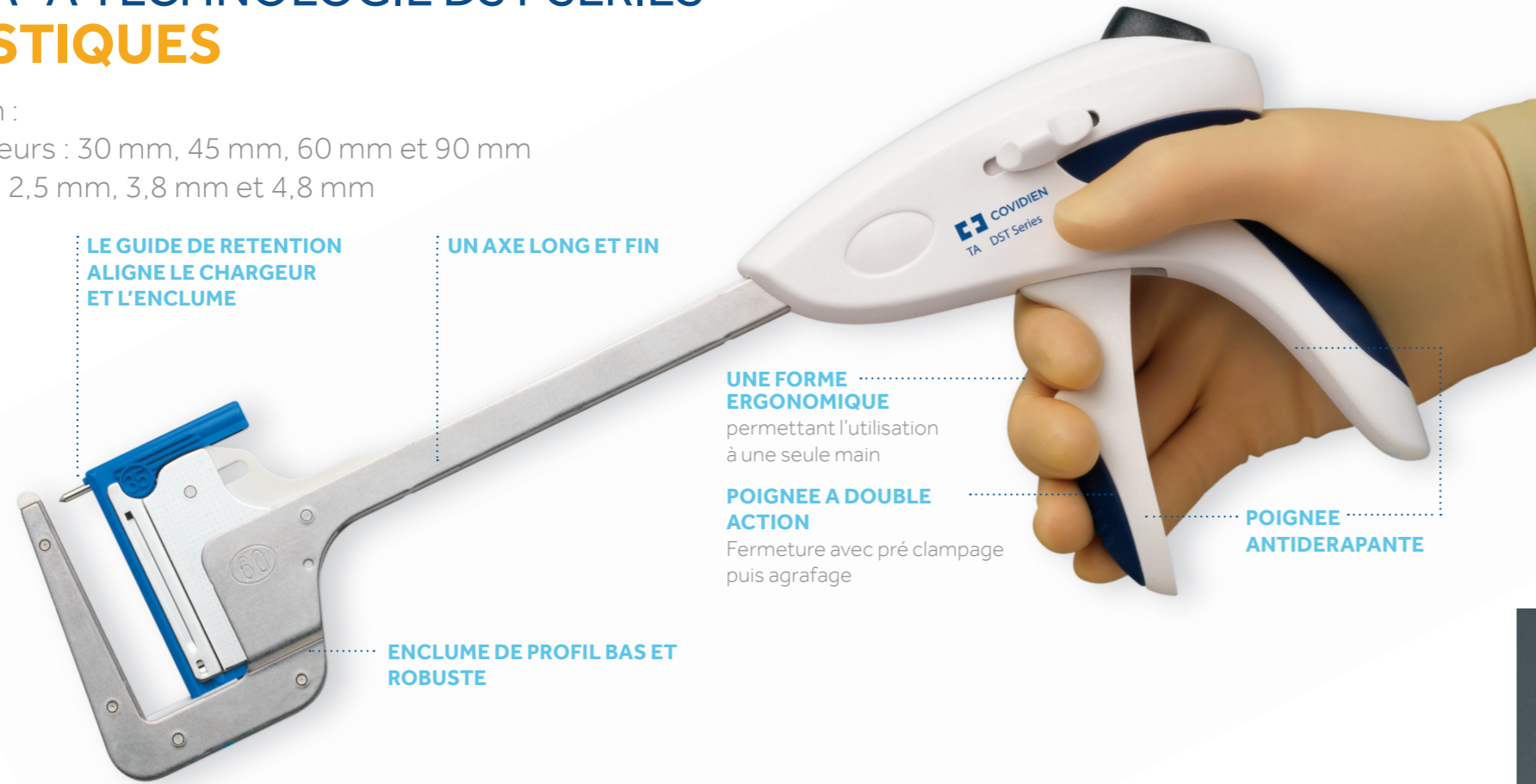

**LE GUIDE DE RETENTION
ALIGNÉ LE CHARGEUR
ET L'ENCLUME**


UN AXE LONG ET FIN

**UNE FORME
ERGONOMIQUE**
permettant l'utilisation
à une seule main

**POIGNEE A DOUBLE
ACTION**
Fermeture avec pré clamage
puis agrafage

**POIGNEE
ANTIDERAPANTE**

**ENCLUME DE PROFIL BAS ET
ROBUSTE**

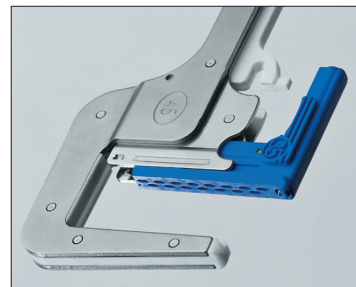

**FERMETURE PARALLÈLE DES
MORS**



UN CHARGEUR JETABLE
Avec goupille de retenue



CONFIRMATION D'ACTIVATION
Les poussoirs jaunes sont alors
visibles



UN BOUTON NOIR
délibération pour ouvrir la pince




**LA MISE EN PLACE DU
GUIDE DE RETENTION DES
TISSUS PEUT SE FAIRE DE
FAÇON AUTOMATIQUE OU
MANUELLE**

TECHNOLOGIE DST SERIES™



AGRAFE CLASSIQUE
Agrafe ronde

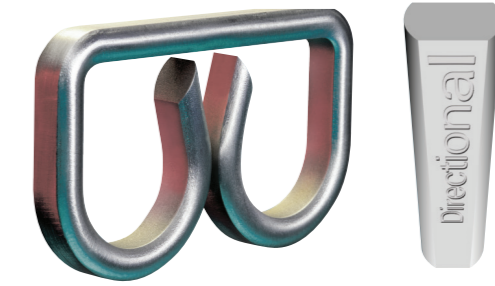

AGRAFE DST SERIES™
Agrafe rectangulaire

